


Système de contention universel

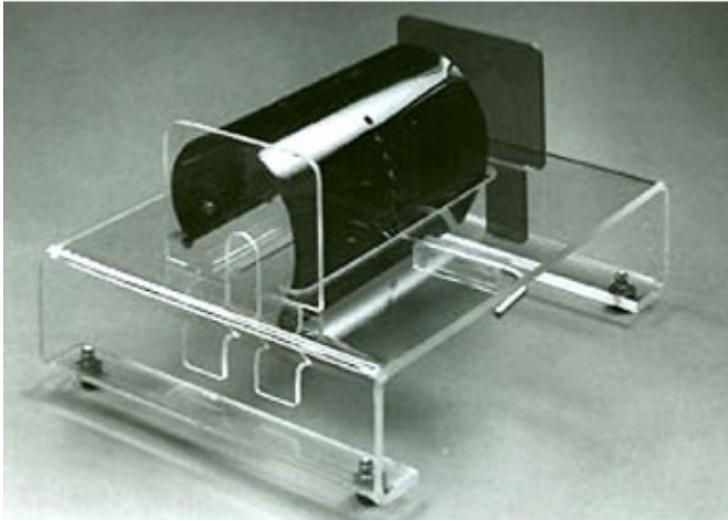

Des expériences simplifiées - modèles différents pour les rats et les souris, en plastique fumé ou transparent

Code/Référence

Reference: 500M-C

Description

Le système de contention universel a été conçu pour permettre au manipulateur d'effectuer tous les gestes de prélèvements et d'injections en une seule immobilisation.

- la fente à la zone abdominale ventrale du rat permet l'accès à la vessie, aux cathéters gastro-intestinaux, aux fistules, à l'administration intrapéritonéale, aux ponctions cardiaques
- la fente dorsale permet la pose de cathéters, d'injection sous cutanées, d'effectuer des ECG et EEG
- la fente à la queue permet les prélèvements et injections ainsi que la prise de tension.

Le matériel est en acier inoxydable et plastique.

Caractéristiques

Poids: souris de 20g à 60g

Poids: rat moins de 350g

Modèles disponibles

Couleur: Transparent (500M-C), Fumé (500M-S)

Animal: Souris de 20g à 60g (500M-C), Souris de 20g à 60g (500M-S)

