


Adaptateur pour souris

Standard pour souris et rats nouveaux-nés

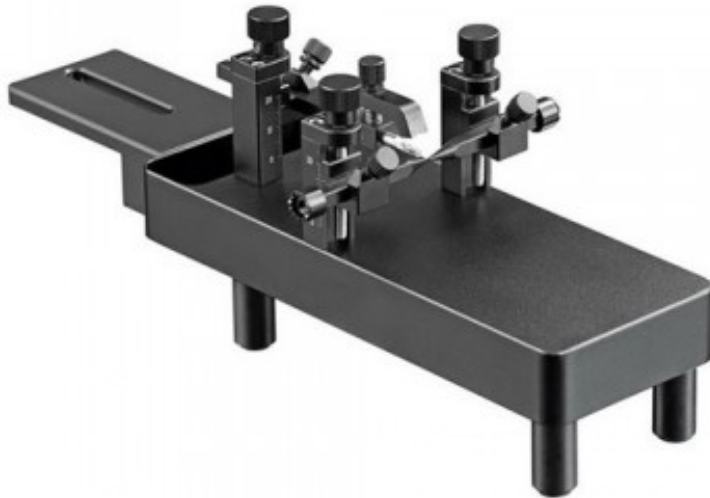

Code/Référence

Reference: BLAB-ST-8030

Description

À utiliser avec la série de cadres U de Bioseb ou d'autres marques d'instruments.

Les souris et les rats nouveaux-nés sont difficiles à sécuriser fermement et doucement à l'aide d'un instrument stéréotaxique standard. Les barres d'oreille en acier inoxydable utilisées pour les rats adultes sont trop résistantes et risquent de comprimer les côtés du crâne vers l'intérieur. Étant donné qu'il n'y a pas de conduit auditif pour le rat néonatal, cet adaptateur utilise un "bloque pommettes" à la place des barres auditives. Cette conception fournit un moyen non invasif et stable pour maintenir les rats néonataux.

L'adaptateur pour souris et rats néonataux de Bioseb est fait de polyoxyméthylène avec des pointes coniques à une extrémité et des embouts en caoutchouc à l'autre, pour faciliter la chirurgie des souris et des rats.

La hauteur peut être ajustée de manière flexible, pour des expériences sous différents angles. Des gravures laser indiquent les positions verticales des barres auriculaires.

Une barre dentaire et un pince-nez sécurisent l'animal.

Caractéristiques

Modèles disponibles

